

Affichage du QT sur l'écran du scope :




Cliquer sur :

- Réglages écran



- Arythmie
- ECG
- Ajouter paramètre QT sur les fonctionnalités de la courbe ECG


Analyse du QTc :

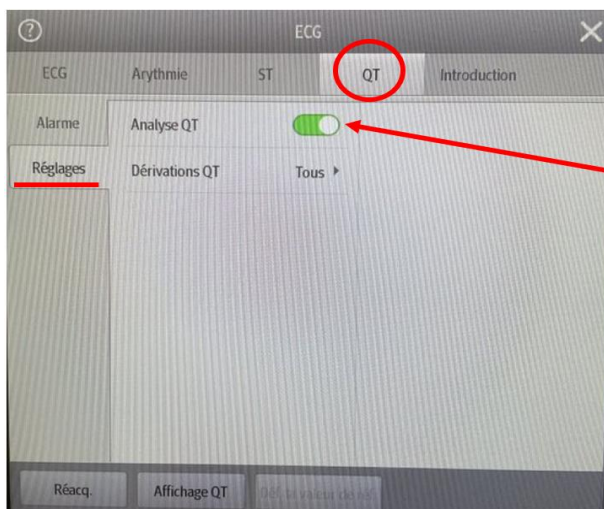

Puis:

- Cliquer sur courbe verte ECG
- QT
- Régles
- Analyse QT (activer)
- Fermer la fenêtre

Affichage du score de glasgow :

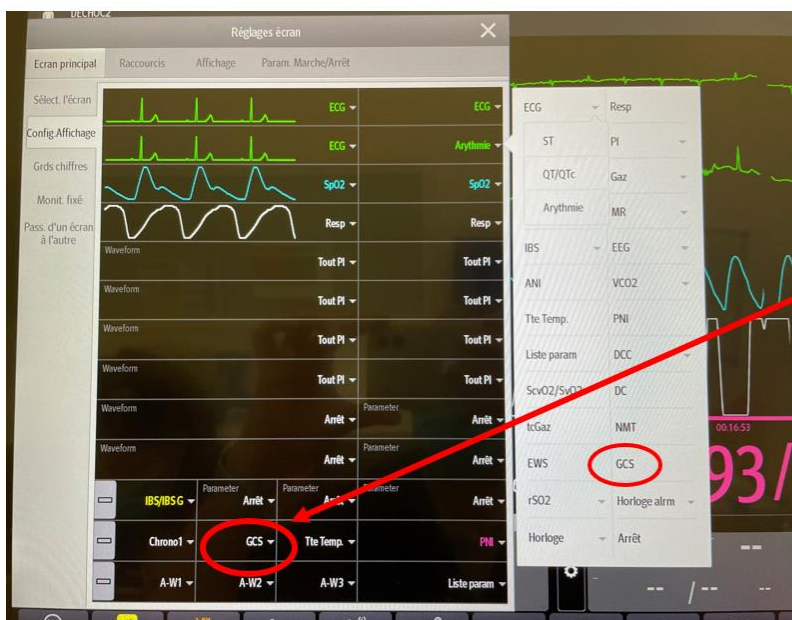

Cliquer sur « Régles écran »



Dans case entourée, à droite de chrono: sélectionner GCS



Il ne peut être réglé manuellement que sur le scope.

Répétiteur



Ecran affichage multi-lit

Ecran affichage lit



Ajouter GSC (Glasgow)



Ajouter QT

